

Máquina de fundição por indução

Heracast® iQ

Heracast® iQ é uma máquina de fundição inteligente, em que o usuário navega no menu auto explicativo que apresenta cada estágio da operação e calcula automaticamente todos os parâmetros de fundição. Com espaço na memória para programação e parametrização de até 100 metais.

Tudo que você precisa em um único equipamento

A Heracast® iQ é um equipamento compacto de mesa, que contém bomba de vácuo e refrigeração integrada. É realmente uma máquina de fundição completa.

Principais vantagens:

- » Nenhum desperdício de metal durante a fundição;
- » Uso mínimo de metal, pois não é necessário considerar o botão de fundição nem acionar canais para saída de gases;
- » Fundição de ligas preciosas;
- » Granulação fina, fundições densas com superfícies lisas;
- » Sem inclusão de partículas de cerâmica ou grafite na fundição.


Fácil de operar

A Heracast® iQ possui uma interface de fácil operação, o que possibilita que de forma interativa o operador informe todos os dados necessários para executar a operação desejada. Devido a essa simplicidade de manuseio, erros de operação são praticamente descartados.

Os mecanismos otimizados da câmara de fundição giram o cadinho e preenchem com o metal o anel de forma rápida. O poderoso gerador de alta frequência aquece de forma rápida e suave ligas nobres, não nobres e CoCr para a temperatura correta.

A Heracast® iQ pode fundir automaticamente ou manualmente através de um operador.

São necessários somente de 3 a 5 minutos para completar todo o processo e realizar a fundição.

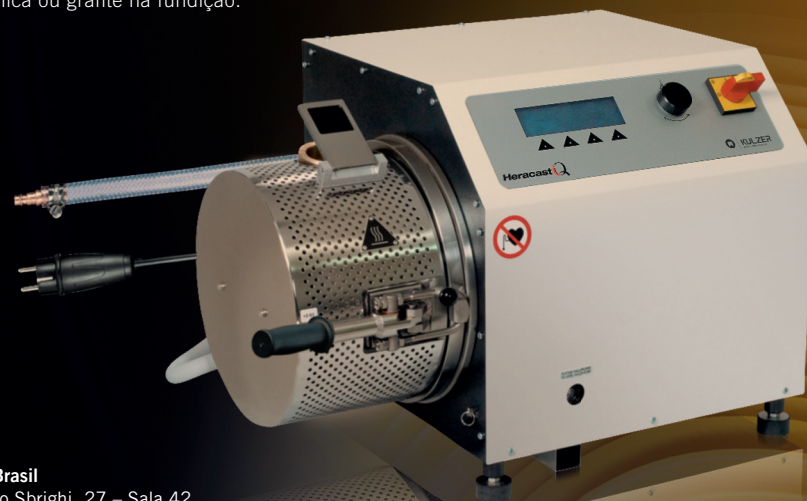


Kulzer Brasil

R. Cenzo Sbrighi, 27 – Sala 42
São Paulo – SP – CEP 05036-010
☎ São Paulo: (11) 3665-0500
☎ Demais localidades: 0800-580-0829
e-mail: sac@kulzer-dental.com

© 2018 Kulzer GmbH. Todos os direitos reservados.

www.kulzer.com.br

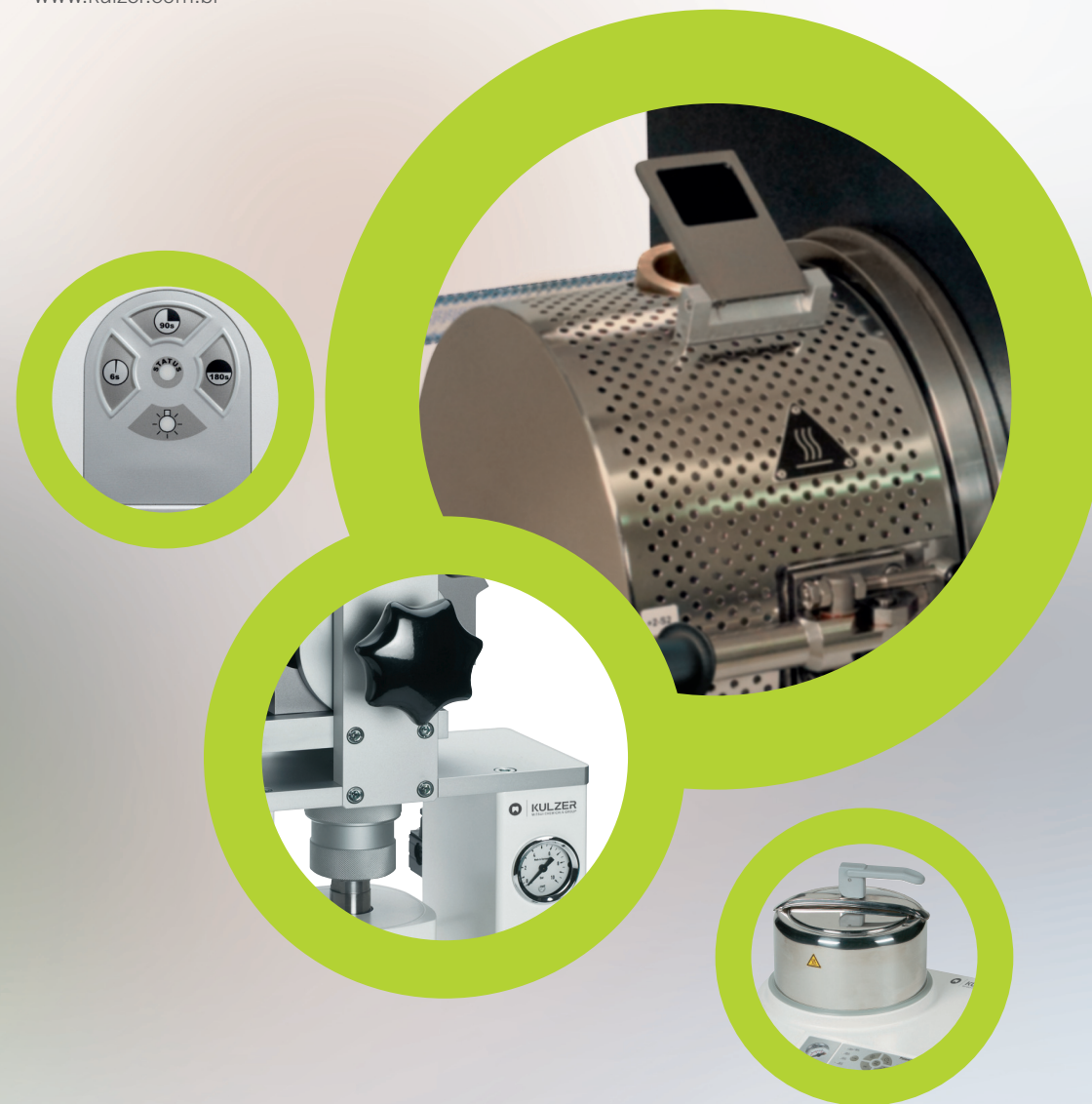Equipamentos de laboratório
Inovação para resultados perfeitos

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

PALA®

signum®

Polimerizador pressurizado

Palamat® elite

Palamat® elite é um dispositivo de polimerização com suporte de ar comprimido, indicado para polimerizações a quente ou frio. Dispõe de 4 programas de temperatura diferentes, que pode ser utilizada conforme necessidade, indicação e materiais.

O equipamento é compatível com todos os articuladores e possui espaço para até 3 muflas do Palajet® (Palajet® Duoflasks) ou 6 próteses que podem ser polimerizadas simultaneamente.

Principais Características:

- » Poder ser utilizado com diversos tipos de prótese acrílica;
- » Função de temporizador para o processo de polimerização personalizado ou pré-definido;
- » Simples instalação;
- » Visor de LED de fácil manipulação.



Injetora a ar comprimido

Palajet®

PALA®



Palajet® é um sistema de injeção acionado a ar comprimido, que se destina à confecção de próteses totais com resinas acrílicas autopolimerizáveis, como a PalaXpress®.

O sistema de dosagem PalaXpress® utilizado corretamente elimina erros de dosagem e assegura propriedades de processamento coerentes.

O resultado é excelente – tanto na simplicidade de fabricação e na qualidade, pois através desse processo é possível obter próteses totais de alta qualidade com muitos benefícios em comparação aos sistemas convencionais.

Principais Características:

- » Fabricação simples de próteses totais;
- » Ajustes de alta precisão;
- » Simples manipulação;
- » Só é necessário a conexão ar comprimido.

Fotopolimerizador para resinas indiretas

Signum® HiLite® power

Ideal para todas as etapas de polimerização (pré e final) das resinas da linha Signum® e Pala® da Kulzer, entre muitos outros produtos fotopolimerizáveis.

Signum® HiLite® power é um equipamento para polimerizar resinas indiretas, indicado para todo o sistema Signum® da Kulzer. Com belo design para facilitar o uso do equipamento, lâmpada de alta duração e possibilidade de escolha de três diferentes tempos de programação de fotopolimerização de 6, 90 e 180 segundos.

Características técnicas:

- » Larga Gama de luz de 320 – 540 nm;
- » Tempos mais curtos de polimerização;
- » Eficiente controle de aquecimento;
- » Uma tomada para todas as fontes de energia;
- » Chip card para registro e documentação de erros.

Apresentação:

- » Módulo Lâmpada HiLite® power com Lâmpada e Chip card;
- » Filtro;
- » Refletor em forma de pote;
- » Suporte para objetos;
- » Cabos de alimentação;
- » 2 bandejas para modelo.

Signum® HiLite® power – dados técnicos

Signum® HiLite® power Art.-No.: 66037191	Voltagem	Fusível de proteção	Peso
	100 – 230 V	4 A	Aprox. 9.5 kg
	Frequência	Consumo de energia	Nível de proteção
	50 – 60 Hz	325 VA	Class I
		Dimensões (A x L x C)	Tempo de ligação
		Aprox. 225 x 345 x 230 mm	80%

