



Catálogo de clínica

Inovação para resultados perfeitos

05/2025

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Resina composta nano-híbrida

Charisma® Diamond**Cores disponíveis:****Dentina:** OL, OM, OD e OB**Esmalte:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3 e D3**Esmalte para dentes clareados:** BL e BXL**Incisais:** CL, AM, CO e YO**Resina universal para dente posterior:** ONE**Apresentação:**

Seringa de 4 gramas

Resina composta nano-híbrida, com alta concentração de carga, que lhe confere elevada resistência mecânica. Desenvolvida e patenteada com o inovador monômero TCD-DI-HEA, que promove menor contração de polimerização.

Com Charisma® Diamond é possível obter excelentes resultados utilizando a técnica de incremento único em casos simples ou a técnica de estratificação nos casos mais desafiadores.

Principais características

- » Resina altamente estética, indicada para dentes anteriores e posteriores;
- » Baixa contração de polimerização;
- » Elevadas propriedades mecânicas;
- » Compatível com todos os sistemas adesivos presentes no mercado;
- » Fluorescência, opalescência e radiopacidade;
- » Sistema com 21 opções de cores.

Conheça o sistema de cores clareadas indicado para facetas compostas diretas da **Charisma Diamond**.

**Antes****Depois**

Caso clínico por:
Dra. Vladja Torno
MSc e PhD
CRO-PR 11.253

Fórmula universal da cor

	Dentina	Esmalte	Esmalte - terço incisal translúcido
Clareados B0, B1 - A1	OB	BXL	CO - Esbranquiçado / Azulado
	OL	A1	CL - Translúcido neutro / claro
Universais A2, B2	OM	A2	YO - Opalescente levemente amarelado
			AM - Translúcido Âmbar
Cromatizados A3, B3 - A4	OD	A3	AM - Translúcido Âmbar

Segundo o estudo espectrofotométrico executado por Yamamoto 1992, sobre a cor do dente natural e as escalas de cores, a maioria dos dentes está no matiz A da escala de cor VITA, sendo a maior proporção entre o A-2 e o A-3.5.

Para o alisamento e brilho final com **Charisma® Diamond** é indicada a lentina cinza de porcelana.

Resina composta nano-híbrida

Charisma® Diamond ONE

Com a nova Charisma® Diamond ONE é mais fácil do que nunca alcançar uma aparência excepcionalmente natural, mesmo na região posterior.

Charisma® Diamond ONE mimetiza perfeitamente com as estruturas circundantes, independentemente da cor do dente, permitindo que as restaurações simplesmente desapareçam.

Isso oferece uma nova solução do uso de uma única cor para a maioria dos casos do dia-a-dia.

Principais características

- » Selecione sempre a cor certa: Com as incríveis propriedades de mimetização da Charisma® Diamond ONE a restauração torna-se imperceptível ao se fundir com qualquer cor de estrutura dental circundante.
- » Manuseio eficiente: Modelar e esculpir é muito fácil devido à sua consistência firme e mínima pegajosidade da resina.
- » Restaurações duradouras: Resistência excepcional para resistir a lascas e fraturas, com mais de 10 anos de experiência clínica comprovada.

Apresentação:

Seringa de 4 gramas

Caso clínico

O Prof. Dr. Carlo Francci, realizou um caso clínico de uma paciente que possuía múltiplas restaurações em amálgama antigas e deficitárias, com forte apelo por melhor estética, o protocolo de tratamento adotado foi a substituição do amálgama por resina composta Charisma Diamond ONE.

**Antes****Depois**

Caso clínico por:
**Prof. Dr. Carlos
Francci**

Resina composta nano-híbrida

Charisma® Bulk Flow ONE



Apresentação:
Seringa de 4 gramas

A primeira solução em resina bulk fill flow de uma única cor para resolver os casos do dia a dia, que oferece uma extraordinária adaptação de cor.

Principais características

Selecione sempre a cor certa: Com a incrível capacidade de adaptação das cores da Charisma Bulk Flow ONE as restaurações se tornam invisíveis e se confundem com a estrutura dos dentes adjacentes.

Fácil manuseio: Cavidades são restauradas de forma rápida e fácil, com incrementos de até 4 mm, sem a necessidade de recobrimento oclusal com uma camada adicional de resina.

Restaurações duradouras: Baixo estresse de contração de polimerização, elevada resistência flexural e resistência ao desgaste, garantem restaurações duráveis que suportam a carga mastigatória na região posterior



Charisma® Bulk Flow ONE simplifica e agiliza o processo restaurador.

Charisma® Bulk Flow ONE combina o efeito nivelador de um material fluido com a alta profundidade de polimerização e boa estabilidade após a aplicação. Isto permite aplicar incrementos de até 4 mm dentro de uma cavidade.



Com Charisma® Bulk Flow ONE os dentistas podem reduzir o tempo de tratamento sem a necessidade de seleção de cor ou inserção de uma resina composta universal em pasta como camada de cobertura adicional.

Com sua gama de indicações, desde preenchimento em um único incremento, passando por revestimento cavitário com o material de forramento, até restaurações em dentes decíduos, o procedimento restaurador eficiente pode ser ainda melhor com o uso do sistema adesivo GLUMA® Bond Universal.

VERSATILIDADE DAS APLICAÇÕES

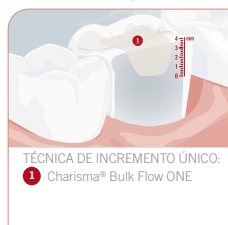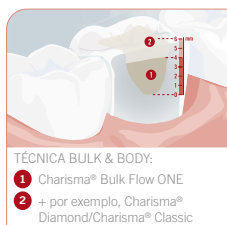

MANUSEIO EFICIENTE

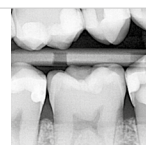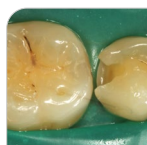

Resina composta micro-híbrida

Charisma® Classic



Cores disponíveis:

Dentina: OA2, OA3 e OA3,5

Esmalte: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3 e C2

Apresentação:

Seringa de 4 gramas

Resina composta micro-híbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de Microglass® II. Indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

Charisma® Classic é a evolução da tradicional Charisma®, resina composta presente no mercado há mais de 30 anos. Ela apresenta uma excelente consistência e permite a obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema capacidade de mimetismo com os dentes naturais. A nova tecnologia de carga patenteada Microglass® II, proporciona um elevado brilho, permitindo excelentes resultados funcionais e estéticos.

Principais características


- » Excelente consistência;
- » Elevadas propriedades de acabamento e polimento, permitindo uma superfície de alto brilho;
- » Gama de cores que resultam em excelente adaptação com o dente natural.

Resinas com tecnologia de carga convencional

- Carga com diferentes índices de refração**
 - » Menos adaptação da cor
- Partículas de dióxido de silício com grandes variações nos índices de refração**
 - » Aspecto de restauração leitosa
 - » Cores opacas intensas não são possíveis
- Pigmentos**
 - » Menos brilho das cores

Tecnologia de carga Microglass® II Charisma® Classic

- Carga com índices de refração alinhados**
 - » Melhor adaptação da cor
- Não utiliza carga de dióxido de silício**
 - » Fácil adaptação e resultado das cores
 - » Cores opacas intensas
- Pigmentos**
 - » Cores com brilho intenso

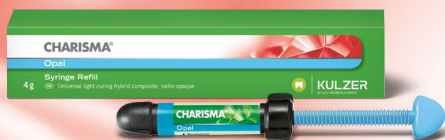

Charisma® Opal

- » Disponível nas cores: BL, CO e OL;
- » Indicada para dentes anteriores e posteriores;
- » Opalescência e fluorescência natural;
- » Alta capacidade de mimetização;
- » Fácil polimento.

Sistema de polimento

Charisma® EasyShine

Alto brilho em apenas um passo

Pontas de polimento, com a elaborada fórmula à base de silicone, livre de látex e impregnadas com pó de diamante micro-fino que promove um resultado excelente e duradouro de polimento.

- » **Excelentes resultados:** A elaborada fórmula composta por silicone, livre de látex, impregnada com pó de diamante micro-fino que promove um resultado excelente e duradouro de polimento.
- » **Sistema de polimento de passo único:** Sem a necessidade de mudar de instrumental, lisura e polimento de alto brilho são totalmente possíveis de serem atingidos.
- » **Solução econômica:** Idealmente desenhada para toda a linha de resinas: Charisma® Diamond, Charisma® Opal e Durafill® VS. Todas as pontas podem ser esterilizadas e, portanto, podem ser reutilizáveis.

Apresentação: Kit com 6 pontas 2X chama, 2X taça e 2X lança



Adesivo dentinário universal

GLUMA® Bond Universal

União para a vida!

Apenas 1 produto para todas as técnicas

Com GLUMA® Bond Universal, você tem a liberdade de escolher a técnica adesiva de sua preferência:

- » **Condicionamento total:** quando você opta pelo condicionamento em esmalte e dentina.
- » **Condicionamento seletivo:** quando o condicionamento é apenas em esmalte.
- » **Auto condicionante:** quando você não promove o condicionamento adicional das estruturas.

Você trabalha com sua técnica de eleição — e sempre obtém uma confiável resistência de união.

●●● adesão para uma ampla gama de indicações e reparos em boca

Um único frasco fornece o adesivo para uso em restaurações diretas e indiretas e reparos intraorais de próteses fraturadas.



Mais preciso,
mais econômico
com Drop Control

Principais características:

- » Adesão de restaurações diretas para todas as classes de cavidades (segundo Black) utilizando resinas ou compômeros fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis ou de polimerização dual.
- » Adesão de materiais para núcleo de preenchimento foto polimerizáveis, auto polimerizáveis ou de polimerização dual.
- » Selamento de áreas hipersensíveis.
- » Selamento cavitário antes de restauração com amálgama.
- » Selamento de fissuras.
- » Selamento de cavidades e preparações de núcleos que antecedem a cimentação temporária de restaurações indiretas (técnica de selamento dentinário).
- » Cimentação de restaurações indiretas com cimentos resinosos foto polimerizáveis, auto polimerizáveis e de polimerização dual.
- » Reparo intraoral de restaurações de resina composta, metalo cerâmica, metálica e restaurações em todos os tipos de cerâmica.

**Apresentação:**

1 frasco com 4 ml.

Rende aproximadamente 220 gotas.

Adesivo dentinário universal

GLUMA® Bond5

Com base em nossa longa experiência em adesão, desenvolvemos o GLUMA® Bond5 - adesivo de 5ª geração, para a técnica de condicionamento ácido total.

Produzido para atender às suas necessidades diárias de adesão descomplicada, o GLUMA® Bond5 apresenta excelente resistência ao cisalhamento e garante restaurações duradouras e bem-sucedidas.

O GLUMA® Bond5 produz excelente adesão ao esmalte e à dentina, além de promover um excelente selamento marginal.

**Com GLUMA® Bond5,
você se beneficia de:**

- » Um manuseio fácil, seguro e excelente desempenho clínico;
- » Uma única camada para o primer e adesivo;
- » Elevada resistência adesiva ao cisalhamento;
- » Fácil utilização do adesivo, sem risco de vazamento do frasco.

Frasco com 4 ml
Rende aproximadamente
220 gotas.



**Com dessensibilizante à base
de glutaraldeído na fórmula**



Mais preciso,
mais econômico
com Drop Control

GLUMA® Etch 35 Gel

GLUMA® Etch 35 Gel é um agente para o condicionamento ácido para esmalte e dentina em tratamentos restauradores adesivos. Possui elevada tixotropia, o que evita que o gel escorra durante a aplicação.



Dessensibilizante

GLUMA® Desensitizer



Mais benefícios, menos sensibilidade

Uma das queixas mais frequentes dos pacientes atualmente é a sensibilidade dentinária. A dor aguda é muito desagradável, dificultando a ingestão de alimentos doces ou amargos, quentes ou frios.

Por mais de 28 anos, GLUMA® tem sido seu melhor aliado no tratamento e prevenção da hipersensibilidade. O resultado é rápido e eficiente, sem a necessidade de mistura, polimerização ou repetições de etapas. E os pacientes sentem alívio imediato.

GLUMA® Desensitizer penetra nos tubos dentinários expostos em até 200 µm de profundidade inter-tubular não interferindo na adaptação de peças protéticas quando da sua utilização de forma preventiva em dentes vitais preparados para instalação de próteses fixas.



GLUMA® Desensitizer – Sua melhor opção contra a hipersensibilidade

Principais características

- » Ação rápida e duradoura;
- » Tradição e qualidade;
- » Indicado para tratamento e prevenção de sensibilidade pós-operatória;
- » Vencedor de várias premiações internacionais.

Apresentação:


1 frasco com 5 ml.

Rende aproximadamente 250 gotas.



Mais preciso,
mais econômico
com Drop Control

Veja como é simples a aplicação do GLUMA® Desensitizer

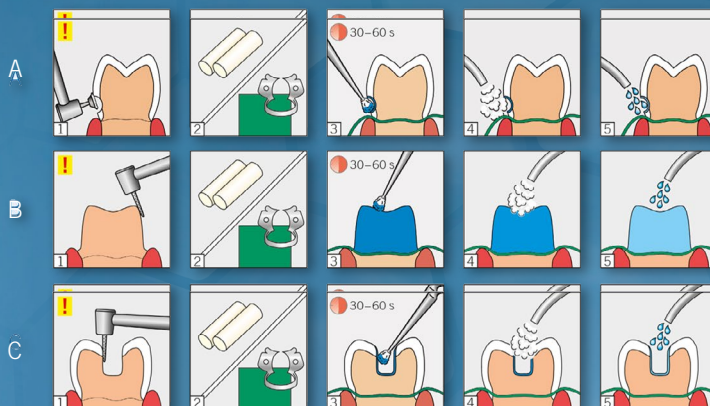

Silicone de condensação

Optosil®, Xantopren® e Activator



Optosil® / Xantopren® continua sendo um dos silicones de condensação mais vendidos mundialmente.

E este reconhecimento não vem por acaso.

Optosil®/Xantopren® mantém-se sempre atualizado, preservando a qualidade técnica que satisfaz as necessidades do cirurgião-dentista há décadas.

Principais características

- » Optosil® Comfort Putty pode ser manipulado com luvas de látex sem interferir na polimerização;
- » Totalmente atóxico;
- » Não produz nenhuma reação à mucosa bucal;
- » Leve sabor de menta;
- » Não provoca sensação de sufocamento;
- » Retorno após deformação de 98,6%.

Apresentação:

Optosil® – 1 pote com 450 ml

Xantopren® – 1 bisnaga com 140 ml

Activator – 1 bisnaga com 60 ml

Veja como é simples manipular o Optosil®:



1. Dosar uma colher medidora com **Optosil® Comfort Putty** e nivelar nas bordas, removendo os excessos.



2. Espalhe a massa em uma placa de vidro, de forma que fique maior que o diâmetro da colher medidora. Marque a circunferência da colher.



3. Coloque 2x o diâmetro da colher de pasta catalisadora **Activator Universal** dentro do círculo marcado com a colher, para cada porção de **Optosil® Comfort Putty** utilizada.



4. Misture a massa até que a mesma esteja homogênea. O tempo de mistura é de 30 segundos.



Veja como é simples manipular o Xantopren®

Dosar o **Xantopren®** e a pasta catalisadora **Activator Universal** em uma placa de vidro, de forma que ambas tenham o mesmo comprimento.

Misture bem os dois materiais para que resulte em uma massa homogênea.

Silicone de adição

Variotime®



Silicone de adição com alta estabilidade dimensional e fidelidade de detalhes.

Variotime® possui um conceito inteligente, que alia flexibilidade de tempo de trabalho com um curto tempo de polimerização intraoral, promovendo conforto ao paciente e versatilidade ao profissional.



Ganhe flexibilidade no tempo de moldagem com Variotime®

	Tempo de trabalho variável Apenas 1:00 min. ou até 2:30 min!	Curto tempo de presa intraoral Sempre 2:30 min!
Moldagem de múltiplos elementos	2:30	2:30
Moldagem de um único elemento	1:00	2:30

Variotime controla a cinética de polimerização pela temperatura intraoral e polimeriza rapidamente após a inserção na boca.

Principais características:

- » Recuperação elástica após deformação de até 99,8%;
- » Baixo grau de alteração dimensional (-0,001%), proporcionando uma maior precisão;
- » Reprodução de rugosidades superficiais inferiores a 20 µm;
- » Excelentes propriedades hidrofílicas, para uma maior reprodução de detalhes.

Apresentação:

Easy Putty: (base e catalisador) 2 potes com 300 ml cada e 2 colheres dosadoras

Light Flow: 2 cartuchos de 50 ml cada e 10 ponteiros misturadoras

Medium Flow: 2 cartuchos de 50 ml cada e 10 ponteiros misturadoras

Monophase: 2 cartuchos de 50 ml cada e 3 ponteiros misturadoras

Silicone de adição

Variotime® Easy Putty

O Variotime Easy Putty é um material de moldagem dental da Kulzer, pertencente à linha Variotime, baseada em silicone por adição (polivinilsiloxano – VPS). Ele é usado principalmente na moldagem de precisão para próteses fixas e removíveis.

Principais características

- » Consistência de massa densa (putty): ideal para técnicas de moldagem em dois tempos ou simultâneas.
- » Tempo de trabalho variável (tecnologia A-Silicone “Time optimized”): permite flexibilidade, com tempo de trabalho de até 2 minutos e tempo total de presa de cerca de 3 minutos.
- » Alta estabilidade dimensional: garante moldagens precisas e com menor risco de distorção.
- » Fácil de manipular e homogeneizar: a versão “Easy” facilita a mistura manual com a pasta catalisadora (geralmente Variotime Easy Putty + Variotime Easy Catalyst).

Indicações:

- » Moldagens de coroas, pontes, inlays, onlays e próteses parciais.
- » Técnicas de moldagem dupla ou simultânea com material leve (como o Variotime Light Flow ou Medium Flow).



Silicone de adição

Variotime® Monophase

O Variotime Monophase é um material de moldagem da Kulzer feito à base de silicone por adição (VPS), com viscosidade média e indicado para técnica de moldagem em passo único (monofásica).

Principais características

- » Viscosidade média (Monophase): permite uso tanto na seringa quanto na moldeira.
- » Tixotropia otimizada: flui sob pressão no sulco gengival, mas permanece estável na moldeira.
- » Tempo de trabalho ajustável: até 2 minutos, com tempo total de presa de cerca de 3 minutos (com a tecnologia “time optimized” da linha Variotime).
- » Alta estabilidade dimensional e precisão de detalhes.
- » Excelente recuperação elástica, facilitando a remoção sem distorção.

Indicações

- » Moldagens para próteses fixas com técnica monofásica.
- » Pode ser utilizado com seringa e moldeira simultaneamente, dispensando o uso de dois materiais com diferentes viscosidades.



Silicone de adição

Variotime® Light Flow

O Variotime Light Flow é um material de moldagem dental da Kulzer, feito à base de silicone por adição (VPS), com baixa viscosidade. Ele é usado principalmente como material de inserção com seringa em moldagens de alta precisão, em combinação com materiais mais pesados (como Variotime Easy Putty ou Monophase).

Principais características

- » Baixa viscosidade (Light Flow): ideal para registrar detalhes finos e margens gengivais.
- » Tixotropia controlada: não escorre quando aplicado, mas flui sob pressão no sulco gengival.
- » Tecnologia “time optimized”: permite tempo de trabalho ajustável (até 2 minutos), com presa rápida intraoral (2:30 min).
- » Alta precisão na reprodução de detalhes.
- » Excelente hidrofília: melhora o contato com tecidos úmidos, evitando bolhas.

Indicações:

- » Moldagens para coroas, pontes, inlays/onlays e implantes.
- » Técnica de duplo passo (putty + light) ou simultânea.
- » Aplicação com seringa diretamente na boca, ao redor da preparação.



Silicone de adição

Variotime® Medium Flow

O Variotime Medium Flow é um material de moldagem dental da Kulzer, baseado em silicone por adição (VPS), com viscosidade média. Ele é projetado para técnicas de moldagem de alta precisão, como a técnica de dois passos (double-mix) e a técnica sanduíche, sendo ideal para registrar detalhes finos em áreas críticas, como o sulco gengival.

Principais características

- » Equilíbrio entre fluidez e estabilidade: pode ser aplicado com seringa ou na moldeira.
- » Excelente hidrofília: reproduz detalhes mesmo em ambientes úmidos.
- » Tempo de trabalho ajustável (1 a 2:30 min) e presa intraoral rápida (2:30 min).
- » Alta elasticidade e precisão dimensional.
- » Disponível em cartuchos Automix para uso com sistemas de mistura automática.

Indicações

- » Moldagens de próteses fixas e implantes.
- » Técnicas de dois passos (com Putty) ou sanduíche.



Máquina de auto-mistura para silicone de adição

Dynamix® speed 2

Precisão com apenas o toque de um botão.

Confiável na qualidade e precisão

- » Materiais de moldagem com mistura homogênea e livre de bolhas, levando a restaurações protéticas de ajuste preciso;
- » Material com propriedade de reprodutibilidade;
- » Qualidade consistente da mistura, independente do operador,
- » para uma constante precisão na adaptação das peças.

Eficiência em alta velocidade

- » Alta velocidade de mistura e dosagem precisa,
- » inclusive para viscosidade de Putty;
- » Manuseio fácil e confiável;
- » Economia de tempo e de material;
- » 3 velocidades selecionáveis.



Silicone para registro oclusal

Variotime® Bite

Seus benefícios em virtude das excelentes propriedades do material

- » Variotime Bite é extra-duro e preciso. Sua altíssima dureza final Shore D 40 evita deslocamentos indesejáveis ao ajustar a posição dos moldes no articulador.
- » Sua tixotropia evita o escoamento da superfície oclusal para os espaços interdentais e permite uma fácil remoção da boca.
- » Apresenta uma excelente escaneabilidade para a aquisição de dados 3D sem a necessidade de pó e de antagonistas para a tecnologia CAD/CAM.

Seus benefícios em virtude das excelentes propriedades de manuseio

- » Variotime Bite é extremamente rápido e apresenta um tempo de trabalho conveniente de 30 segundos, além de um
- » tempo de polimerização intraoral, também rápido, de apenas 30 segundos para maior conforto do paciente.
- » O material polimerizado é fácil de ser desgastado e recortado, com o mínimo risco de fratura.
- » Sua consistência cremosa garante uma mordida sem resistência.

Variotime Bite é amplamente indicado

- » Registro oclusal padrão.
- » Revestimento dos garfos para articulador.
- » Produção de modelos parciais.
- » Registro oclusal escaneável, sem a necessidade do uso de pó para tecnologia CAD/CAM




Sistema de impressão 3D

cara® Print Cube

A cara® Print Cube é parametrizada com todas as resinas dima® Print. Assim como nos sistemas anteriores, não é necessário qualquer tipo de calibração. Basta carregar o arquivo na impressora, abastecer com a resina dima® Print específica para o trabalho e imprimir.

SISTEMA VALIDADO

COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS DIMA® PRINT. GARANTINDO INTEGRAÇÃO PERFEITA.

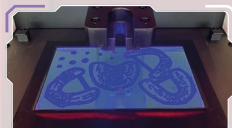**ALTA PRECISÃO**

RESOLUÇÃO DE 6K E PRECISÃO DE 34 µm

**ÁREA DE IMPRESSÃO EXPANDIDA**

ADAPTADA PARA IMPRESSÃO DE MAIOR QUANTIDADE DE MODELOS/PEÇAS



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Benefícios

- » Tecnologia Avançada: LCD com ótimo custo-benefício.
- » Economia Inteligente: Tanques de resina acessíveis para materiais específicos, reduzindo processos de limpeza.
- » Simples e Prático: Fácil Instalação e Plug & Play.
- » Manutenção Simplificada: Autoatendimento para peças sobressalentes.
- » Recursos Extras: Opção de aquecimento da resina para resultados otimizados.

Características

- » Espaço Extra: Área de construção maior, adaptada para impressão de maior quantidade de modelos/peças.
- » Ampla Plataforma: Área de impressão de 192 x 120 x 190 mm.
- » Tela Avançada: LCD monocromática de 9,25" com resolução 6K (570 x 3600 pixels).
- » Desempenho Preciso: LED com comprimento de onda de 405 nm.
- » Interface Moderna: Painel Touch de 7", colorido e intuitivo.

Tecnologia LCD

- » A tecnologia LCD é similar à tecnologia DLP. Pisca camadas completas no tanque de resina, mas com luz UV proveniente de uma série de LEDs brilhando através de uma tela LCD. A tela funciona como uma máscara, revelando apenas os pixels necessários para a camada atual e apagando o restante.



Sistema de impressão 3D

cara® Print LedCure



Sistema de impressão 3D

cara® Print LedCure



Resina fotopolimerizável biocompatível

dima® Print

A Kulzer combinou sua tradição no desenvolvimento de materiais Odontológicos com seu vasto conhecimento em impressão 3D para lançar a linha de resinas para impressão dima®.

Os materiais de impressão dima®, são biocompatíveis e já estão registrados pela ANVISA, além disso, toda a linha foi especialmente otimizada para impressão em 3D na cara® Print 4.0.



Visão geral das diferentes aplicações:



dima® Print Stone teal
Material para produção de modelos odontológicos.



dima® Print Stone bege
Material para produção de modelos odontológicos.



dima® Print Stone gray
Material para produção de modelos odontológicos.



dima® Print Stone bege Smart
Material para produção de modelos odontológicos.



dima® Print Splint clear
Indicada para produção de placas de mordida e bruxismo na cor transparente



dima® Print Teeth & Temp
Material para produção de dentes temporários e para próteses móveis.



dima® Print Denture Base
Material para produção de base de próteses totais impressas.



dima® Print Gingiva Mask
Gengiva artificial para modelos



dima® Print Cast ruby
Material calcinável para injeção e fundição



dima® Print Guide & Tray
Guia cirúrgica e moldeira individual

Dentes acrílicos

Dente Premium®

A linha de dentes para as mais altas exigências de estética, função e aparência natural.

Com sua morfologia totalmente anatômica e sua dinâmica de luz natural, produz resultados de altíssima qualidade, particularmente para próteses removíveis, próteses sobre implante e fixas, facilitando assim a integração efetiva à dentição adjacente.

Resumo dos benefícios:

- » Máxima estética, com aparência natural das formas dentárias;
- » Montagem individualizada;
- » Alta resistência à abrasão e opalescência natural, garantida pelas Flexecure®;
- » Multifuncional em qualquer conceito de montagem, bem como para relações mandibulares harmônicas ou não, garantem mais flexibilidade para o cirurgião-dentista;
- » Absolutamente realista: Fiel aos moldes da natureza. Idênticos aos dentes naturais;
- » Dificilmente distinguível com relação à dentição adjacente;
- » Área basal ampla e de maior volume para melhor contorno das papilas;
- » Twist vestibular, para uma morfologia mais natural.



Dentes acrílicos

Dente Delara®

Uma linha de dentes moderna e versátil, com estética natural, para todas as indicações.

Todo mundo ama o Delara®.

Uma linha de dentes moderna e versátil, com estética natural, para todas as indicações.

Delara da Kulzer, é uma linha de dentes que atende à todas as necessidades dos Técnicos em Prótese Dentária e Cirurgiões-Dentistas – oferecendo estética, forma e função, com uma estrutura de superfície texturizada e estratificação das camadas, de tal forma a garantir uma aparência viva e natural.



Vantagens do Delara®:

- **Montagem fácil para resultados previsíveis:** liberdade durante a montagem sem a necessidade de desgastes excessivos ou alterar a forma básica e dos efeitos de estratificação.
- **Flexibilidade:** ampla gama de cores e formas anatômicas, otimizadas para garantir estética e para todas as indicações e opções de montagem.
- **Estética:** proporcionado por um efeito levemente “azulado” das bordas incisais para uma aparência jovem, além de cores naturais, estrutura de superfície texturizada que permite uma excepcional refração e dinâmica da luz.
- **Custo-benefício:** uma linha de dentes para todas as indicações de uso diário.



“É por isso que dizemos
“Todo mundo ama o Delara®”.

”

Uma surpresa para o seu laboratório

Nossa bela linha de dentes oferece montagem fácil, uma estrutura de superfície texturizada e excelente custo-benefício. Delara® é uma linha de dentes completa e perfeita para o uso diário. Mesmo ao fazer ajustes, os técnicos em prótese dentária podem ter certeza de que a estética de aparência juvenil e o efeito “azulado” do Delara® não serão perdidos. Os dentes proporcionam uma translucidez suave que evita o efeito “acinzentado” exagerado que pode ocorrer na boca – assim, os pacientes poderão apreciar sua aparência mais jovem e natural.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Consultor(a): _____

E-mail: _____

Telefone: _____

Kulzer Brasil

R. Cenzo Sbrighi, 27 – Sala 42
São Paulo – SP – CEP 05036-010

☎ Telefone: 0800-580-0829

e-mail: sac@kulzer-dental.com